

3M Bilimi.
Hayatın her anında.™

Sizin restorasyonunuz. Sizin kompozitiniz.
Sizin gününüz.

**Universal ile
daha basit.**

**3M™ Filtek™
Universal Restoratif**



8 Tasarım Rengi. 1 Universal Opasite. Bundan daha basit olamaz.


Verimlilik yoğun hasta takvimini yönetmek için önemli bir anahtardır. Bu nedenle, diş hekimleri vakalarının %80'inde tek opasite kullanmaktadır. 3M, restorasyonları kolaylaştırmak için 3M™ Filtek™ Universal Restoratif'i geliştirdi.

Restorasyon, basitleştirilmiş renk seçimiyle başlar.

Sadece 8 tasarım rengi ve ilave olarak Extra White (XW), 19 VITA klasik ve bleach renklerini kapsamaktadır. Ayrıca renkler, çoğu klinik ihtiyacınızı karşılayacak Universal opasiteye sahiptir.

- **NaturalMatch teknoloji** (nano doldurucular, özel düşük-stress monomerleri ve pigmentler) tek renk estetik materyal ile dentin dokusunun daha doğal harmanlanmasını sağlar.
- **Florasan pigmentler** gerçekçi bir görünüm kazandırır.
- **3M dolgu teknolojisi** radyopasitenin artırılmasına imkan tanır.

8 tasarım rengi:

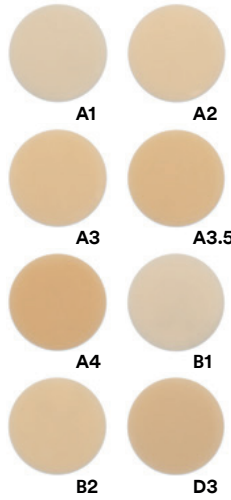

Extra White (XW) ve Pembe Opaker (PO) gibi seçenekler, benzersiz durumlarda mükemmel estetik sonuçlar ortaya çıkarmanıza yardımcı olur.


Hasta beklentilerinizi karşılamaya yardımcı olmasın için Extra White'ı yarattık.



XW

Karanlık alanların estetik sonuçlarının olumsuz etkilemesini engelleyebilirsiniz. Pembe Opaker, metal ve lekeli dişleri etkili bir şekilde maskeler.

Pembe Opaker (PO)

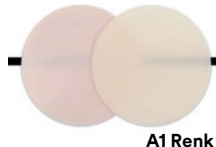



A1 Renk

Yeni bir Universal kompozit sınıfı.

Polimerizasyon anından itibaren restorasyonlar çığneme, fırçalama ve öğütme ile mücadele ederler. Tescilli iki dental teknolojiyi ilk kez Universal bir kompozitte birleştirerek 3M dayanıklılık çitasını yükseltti.

Düşük-stres monomer teknolojisi

Bulk-fill kompozit teknolojilerimize öncülük eden düşük-stres monomerleri, restorasyonları büzülmeden ve büzülmeden kaynaklı stresden korumaya yardımcı olur.

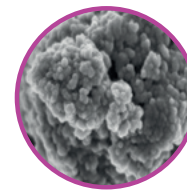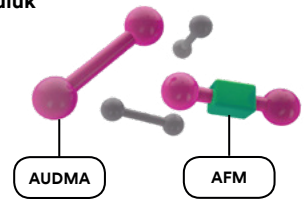

3M'in patentli GERÇEK nanoteknolojisi

restorasyonlara uzun süreli korunabilen mükemmel cila, yüksek dayanım ve mükemmel aşınma direnci sağlar.

100K büyütme ile nanocluster görüntüsü. Dr. J. Perdigão, University of Minnesota izniyle SEM görüntüsü.

Temel Özellikler

- Basitleştirilmiş renk seçimi - çoğu hastanızda kullanabileceğiniz sadece 8 tasarım rengi
- **Universal opasite** ile daha doğal görünümler
- **Extra White (XW)** ile beyazlatılmış dişlere uyum sağlama
- **Floresan pigmentler** ile restorasyonlarda daha gerçekçi bir görünüm
- **Pembe opaker** ile koyu alanları kolayca maskeleye
- **3M nano-teknolojisi** ile uzun süreli kolay cilalama
- **Tescilli düşük-stres monomerleri** ile kırılma direnci
- **Artırılmış radyopasite** ile muayenede kolay tanımlama

Endikasyonlar

- Direkt ön ve arka bölge restorasyonlarında (okluzal yüzeyler dahil)
- Core yapımında
- Splint yapımında
- Inlay, onlay ve veneer gibi indirekt restorasyonlarda




Sipariş Bilgisi

3M™ Filtek™ Universal Restoratif

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
6570-SK	6570-SK 3M™ Filtek™ Universal Restoratif Essential Kit, Şırınga Kit içeriği: 5 x 4 g şırınga: 1 adet A1, A2, A3, A3.5 ve PO; Teknik Kılavuz; Kullanım Talimatları.

Refil	Ürün Kodu
RENKLER	ŞIRINGA
A1	6570A1
A2	6570A2
A3	6570A3
A3.5	6570A3.5
A4	6570A4
B1	6570B1
B2	6570B2
D3	6570D3
XW-Extra White	6570XW
PO-Pembe Opaker	6570PO

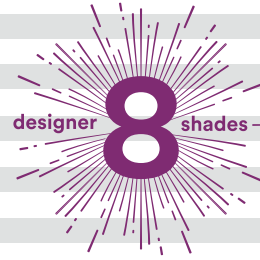

Tüm refiller Teknik Klavuz ve Kullanım Talimatları içerir.



3M Oral Care

3M Türkiye

Barbaros mah. Mor Sümbül sok.
No7/3F 27-51 Nidakule Ataşehir Güney
34746 Ataşehir/İstanbul
3M.com.tr



3M Dental Türkiye

3M ve Filtek, 3M'in ticari markalarıdır.
Türkiye'de basılmıştır.
© 3M 2019.
Bütün hakları saklıdır.

